

# Hygiena

## Medi-Check™

szybki i czuły test do wykrywania pozostałości protein

### opis produktu

Test Medi-Check™ to szybki i łatwy sposób na dokładne monitorowanie stopnia zanieczyszczenia powierzchni urządzeń medycznych, a także sprzętu stomatologicznego i chirurgicznego, pomagający zapewnić bezpieczeństwo użytkowników i jakość wyrobów. Test Medi-Check™ wykrywa wszelkie pozostałości protein znajdujące się na powierzchni po myciu i dezynfekcji. Aby przeprowadzić badanie należy pobrać wymaz z powierzchni, dodać odczynnik, a w razie obecności pozostałości zawierających proteiny odczynnik zmieni barwę na fioletową. Stopień zmiany barwy oznacza poziom zanieczyszczenia powierzchni. Im większe zanieczyszczenie, tym szybciej następuje zmiana barwy na fioletową i jej odcień jest ciemniejszy. Test Medi-Check™ natychmiastowo weryfikuje czystość powierzchni, umożliwiając w razie potrzeby wdrożenie odpowiednich działań korygujących.

### podstawowe cechy i zalety

wyniki w ciągu 15-30 minut  
(test wykrywa 3µg białka: po 30min w temp. 37°C lub po 15min w temp. 55°C),  
należy zastosować dowolny inkubator;  
łatwość interpretacji wyniku;  
urządzenie typu „all-in-one”;  
wstępnie nawilżony gazik ułatwia pobranie próbki;  
test podlega 100% recyklingowi;  
18-miesięczny okres przechowywania (w temp. 2-25°C)

### sposób użycia i odczyt wyników


Należy we właściwy sposób, opisany w instrukcji, pobrać wymaz z badanej powierzchni. Następnie zatrzaskać probówkę, przełamać górną folkę i ścisnąć ją palcami, żeby odczynnik spłynął na dno probówki, gdzie znajduje się próbnik z wymazem. Potrząsnąć folką. Odczytać wynik testu zgodnie z instrukcją.

### obszary zastosowań

Medi-Check™ to test idealny dla placówek medycznych, producentów żywności, Centralnych Sterylizatori, Bloków Operacyjnych, Pracowni Endoskopowych i sal zabiegowych.



odczyt wyników:

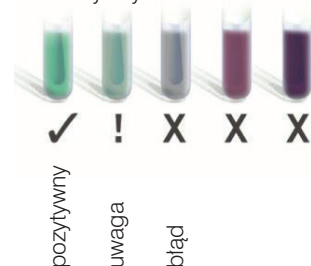

### przechowywanie i okres przydatności

Przechowywać w temp. 2 - 25°C;  
Okres przydatności:  
na opakowaniu zbiorczym

### numer katalogowy i opakowanie


**MDCK100** 100 szt./opakowanie



### INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska  
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19  
e-mail: [biuro@informermed.eu](mailto:biuro@informermed.eu)  
[www.informermed.eu](http://www.informermed.eu)

## procedura Medi-Check

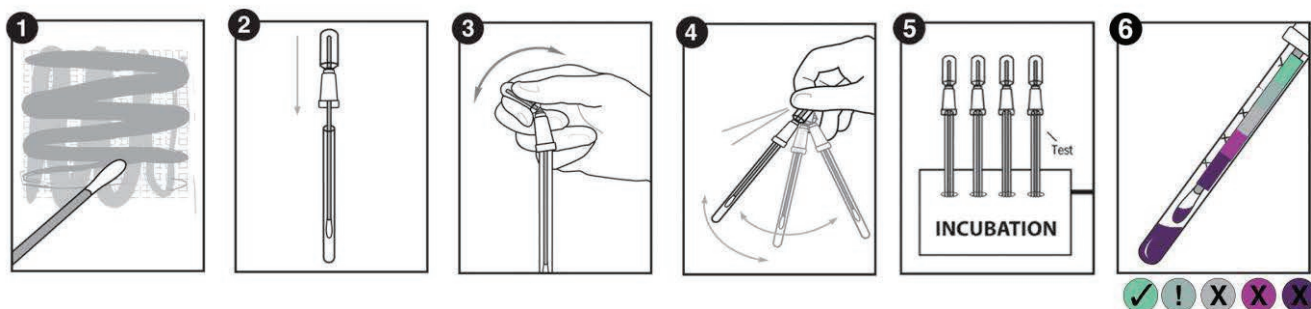

## produkty powiązane




### System SURE Plus

System SURE Plus wykorzystuje się do monitorowania higieny ATP. Jest to przyrząd wielkości dłoni, łatwy w użyciu, bardzo czuły i w przystępnej cenie. System SURE Plus pozwala użytkownikom szybko określić skuteczność mycia i stan higieny powierzchni w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego.

### UltraSnap i SuperSnap



UltraSnap dokonuje pomiaru adenozyotrójfosforanu (ATP) na powierzchniach. SuperSnap to najbardziej czuły tester ATP firmy Hygiene. ATP znajduje się w materii organicznej powstałej ze wszystkich organizmów żywych; jego obecność powinna być znacznie zmniejszona po myciu. Monitorowanie ATP zapewnia natychmiastowy i obiektywny pomiar wydajności mycia. Wyniki testów przy pomocy testerów UltraSnap & SuperSnap mierzone są w luminometrze System SURE Plus.

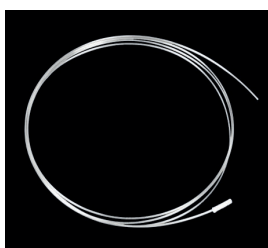

### Endoswab

Endoswab umożliwia weryfikację czystości endoskopów oraz innych przyrządów wielokrotnego użycia, posiadających miejsca trudnodostępne do mycia, np. wewnętrzne kanały. Tester posiada próbnik z pianki absorbującej, dołączony do długiego elastycznego pręta. Po pobraniu próbki próbnik usuwa się i wykorzystuje z testerami ATP firmy Hygiene. Endoswab zapewnia bezpieczeństwo użytkowania endoskopów oraz pozostałych przyrządów wielokrotnego użycia a także skuteczność procedur mycia.

## numer katalogowy i opakowanie

SS3H	System kontroli mycia System SURE Plus ATP z oprogramowaniem SureTrend	1 szt./ opakowanie
US2020	Gazik UltraSnap do przecierania powierzchni	100 szt./ opakowanie
SUS3000	Tester SuperSnap ATP o wysokiej czułości	100 szt./ opakowanie
ENDOSWAB	Endoswab - gazik do weryfikacji mycia endoskopów	100 szt./ opakowanie



### INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska  
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19  
e-mail: [biuro@informermed.eu](mailto:biuro@informermed.eu)  
[www.informermed.eu](http://www.informermed.eu)